

T-DOC EndoTrace

La solution intelligente pour la manipulation, le suivi et le stockage des endoscopes

Une solution innovante pour répondre aux exigences de demain

Introduction

Présentation

T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

Traçabilité

Aide utilisateur

Retraitement flexible

Séchage et stockage

Emballage sous vide

Normes de conservation

Modules complémentaires

Équipement connecté

Livraison

Services continus

Maitriser les défis de l’endoscope

Répondre aux exigences liées aux endoscopes grâce à des solutions plus intelligentes en matière de retraitement, de conformité et de flux de travail.

Les endoscopes deviennent de plus en plus complexes, nécessitant un retraitement minutieux, un strict respect des instructions d’utilisation et une conformité réglementaire. Alors que les flux de travail au sein de l’unité de retraitement des endoscopes deviennent de plus en plus exigeants, le besoin d’une approche flexible n’a jamais été aussi important. Avec T-DOC EndoTrace, les hôpitaux peuvent garantir la fiabilité, améliorer l’efficacité et maintenir les plus hauts standards de sécurité et de conformité.

Avantages de T-DOC EndoTrace:

- ✓ Gestion complète des endoscopes favorisant la transparence et la visibilité
- ✓ Conformité aux exigences strictes de traçabilité, de manipulation et de stockage
- ✓ Guide intuitif simplifiant la manipulation des endoscopes complexes
- ✓ Grande flexibilité pour s’adapter à la diversité des types d’endoscopes et de leur manipulation



Introduction

Présentation

T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

Traçabilité

Aide utilisateur

Retraitement flexible

Séchage et stockage

Emballage sous vide

Normes de conservation

Modules complémentaires

Équipement connecté

Livraison

Services continus

Contrôle complet de tous vos endoscopes

De la surveillance des dates d’expiration à la gestion des procédures de manipulation, T-DOC EndoTrace garantit que les endoscopes peuvent être utilisés en toute sécurité une fois retraités.

Assure une traçabilité complète et garantit la qualité de gestion des endoscopes en suivant chaque endoscope à chaque étape, en les reliant à des actions, des processus, un patient et un médecin spécifiques. Cela garantit la conformité, un retraitement précis et en temps voulu pour réduire les risques d’infection et optimiser la sécurité des patients. Avec T-DOC EndoTrace, vous savez toujours l’emplacement et l’état d’un endoscope, avec une visibilité claire dans les salles de traitement.

Optimisez votre retour sur investissement

La solution génère des économies concrètes en réduisant le stock d’endoscopes, en assurant le suivi des réparations coûteuses et en gérant les problèmes de non-conformité. T-DOC EndoTrace réduit les processus manuels et garantit le retraitement correct des endoscopes prévenant ainsi les dommages coûteux.



Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison


- Services continus

Traçabilité tout au long du cycle de vie de l'endoscope

Obtenir une traçabilité complète, afin d'assurer la conformité réglementaire et le plus haut niveau de sécurité pour les patients.

Suivez facilement chaque détail du parcours de chaque endoscope - de son enregistrement et utilisation sur le patient à chaque étape du cycle de nettoyage, en passant par le stockage et le transport. T-DOC EndoTrace relie le patient, le médecin et le membre du personnel à l'endoscope, garantissant une traçabilité complète depuis la manipulation jusqu'à la maintenance.

Il existe de nombreuses exigences réglementaires en matière de retraitement, de traçabilité, de stockage et de transport des endoscopes. T-DOC EndoTrace facilite la documentation électronique pour s'assurer que tous les endoscopes sont désinfectés et manipulés correctement, conformément aux protocoles requis par votre établissement ainsi qu'aux normes réglementaires locales, nationales et internationales. Cela garantit la sécurité des patients, réduit le risque d'infection et assure une qualité de soins optimale.

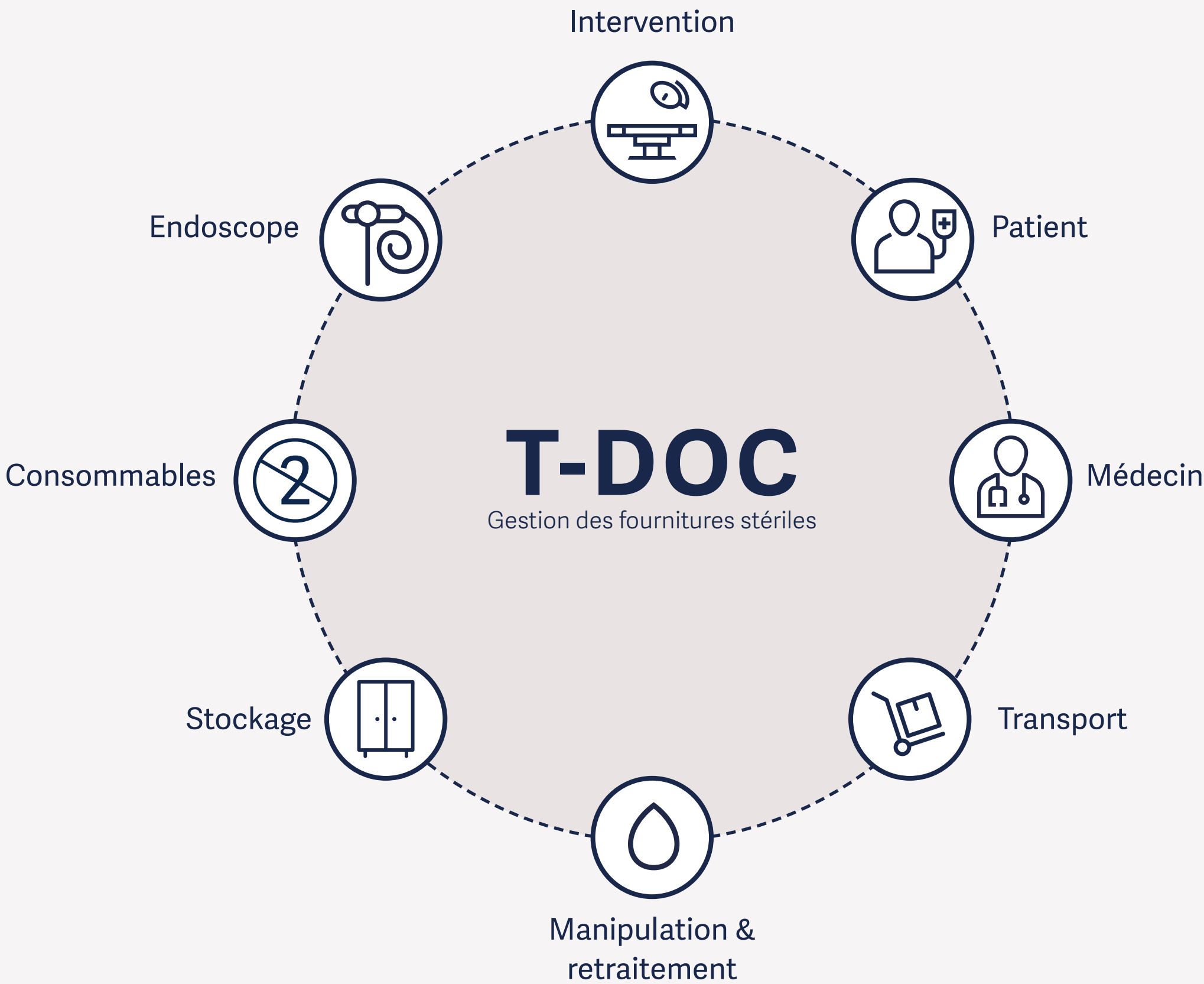

Introduction

Présentation

T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

Traçabilité

Aide utilisateur

Retraitement flexible

Séchage et stockage

Emballage sous vide

Normes de conservation

Modules complémentaires

Équipement connecté

Livraison

Services continus

Conçu pour le personnel, pensé pour la simplicité

Des instructions simples à chaque étape rendent la manipulation des endoscopes sûre, efficace et sans stress pour tous les membres de l'équipe.

T-DOC EndoTrace aide le personnel en fournissant des instructions claires et détaillées - y compris des images, de l'audio et des vidéos - pour le démontage, le nettoyage, l'inspection, le stockage et le transport précis des endoscopes. Cela favorise la cohérence des processus et améliore l'efficacité du flux de travail.

Si des étapes sont omises ou si un processus échoue, le personnel est immédiatement alerté de prendre des mesures correctives, ce qui aide à maintenir une qualité de production élevée et à minimiser les erreurs.

L'interface intuitive aide également à la formation des nouveaux membres du personnel, réduisant les difficultés d'apprentissage et garantissant une manipulation fiable dès le premier jour, apportant une véritable valeur ajoutée à l'intégration et aux flux de travail quotidiens.

Étape par étape

écran tactile  ou scan de code-barres 

- 1 Sélectionnez/scannez votre identifiant
- 2 Sélectionnez/scannez l'endoscope
- 3 Marquez les étapes comme complètes lorsqu'elles sont traitées

 Démontage

 Pré-lavage

 Test de fuite

Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison


- Services continus

Stérilisation fréquente ou occasionnelle ?

Adapter les décisions de retraitement et de stérilisation aux besoins uniques de chaque endoscope.

La variété et la complexité croissantes des endoscopes, associées à des besoins variés en matière de retraitement, nécessitent une approche flexible de la gestion des endoscopes.

T-DOC EndoTrace offre cette flexibilité, permettant de prendre des décisions précises quant à la stérilisation ou à la mise en circulation d’un endoscope à un moment donné, en fonction de son type et de son usage. Par exemple, les endoscopes utilisés fréquemment peuvent ne nécessiter qu’une stérilisation en fin de journée afin de prolonger leur durée de validité.

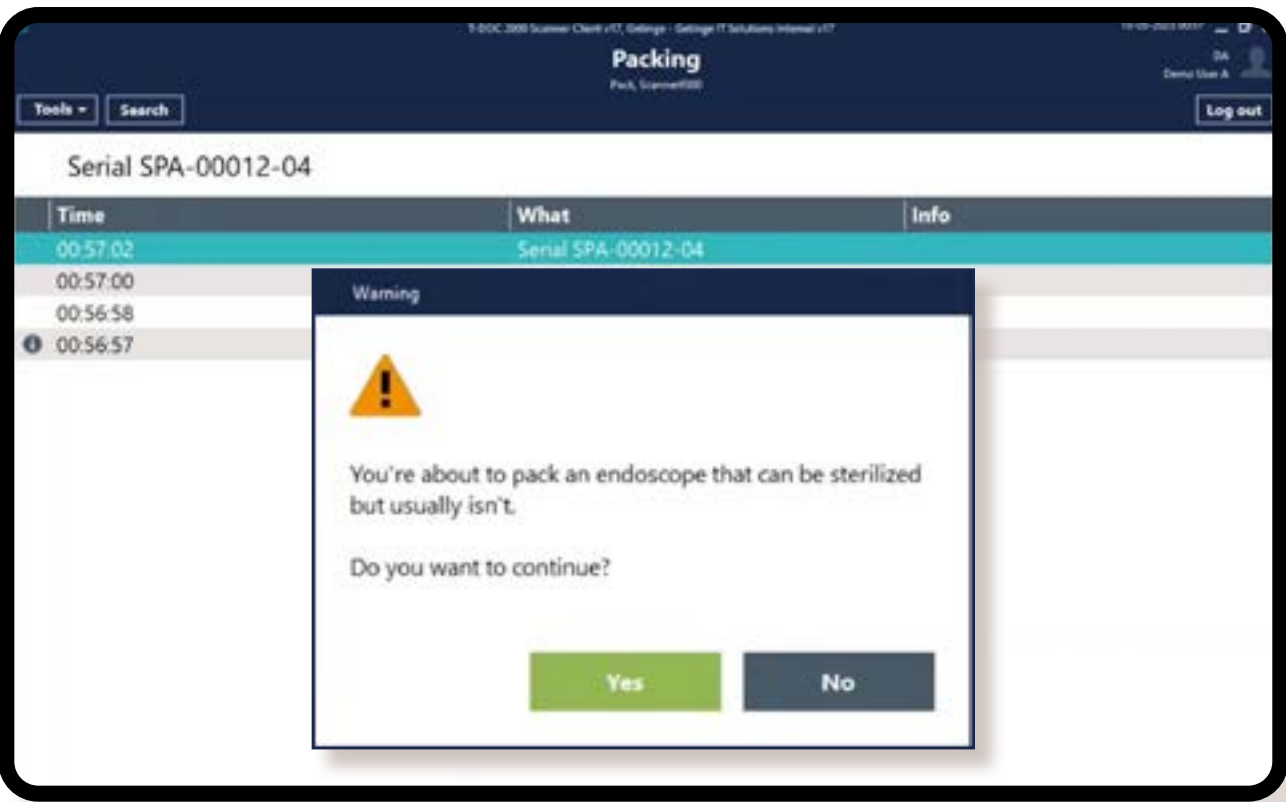

Les notifications automatisées garantissent la conformité, tandis que les configurations permettent à certains utilisateurs de déroger aux règles de stérilisation. Le résultat ? Une efficacité accrue, une durée de vie prolongée des endoscopes et une assurance de respecter les normes de sécurité des patients.



Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison

- Services continus

Séchage et stockage simplifiés


Aperçus en temps réel pour garantir la disponibilité des endoscopes lorsque vous en avez besoin.

L’aperçu de l’armoire de séchage T-DOC offre une vision complète de l’emplacement et de la date d’expiration de tous les endoscopes stockés dans les armoires de séchage et de stockage.

En appliquant le principe du premier entré, premier sorti, il aide les services à optimiser l’utilisation des endoscopes et à prévenir les péremptions, garantissant des flux de travail efficaces et prolongeant la durée de vie des endoscopes.

Les endoscopes peuvent être filtrés en fonction de critères spécifiques, tels que le type ou la date d’expiration prédéfinie, permettant au personnel d’identifier rapidement les endoscopes dont ils ont besoin.

Accessible directement depuis les salles de traitement, l’aperçu assure des flux de travail fluides et favorise une collaboration efficace entre les différents services.

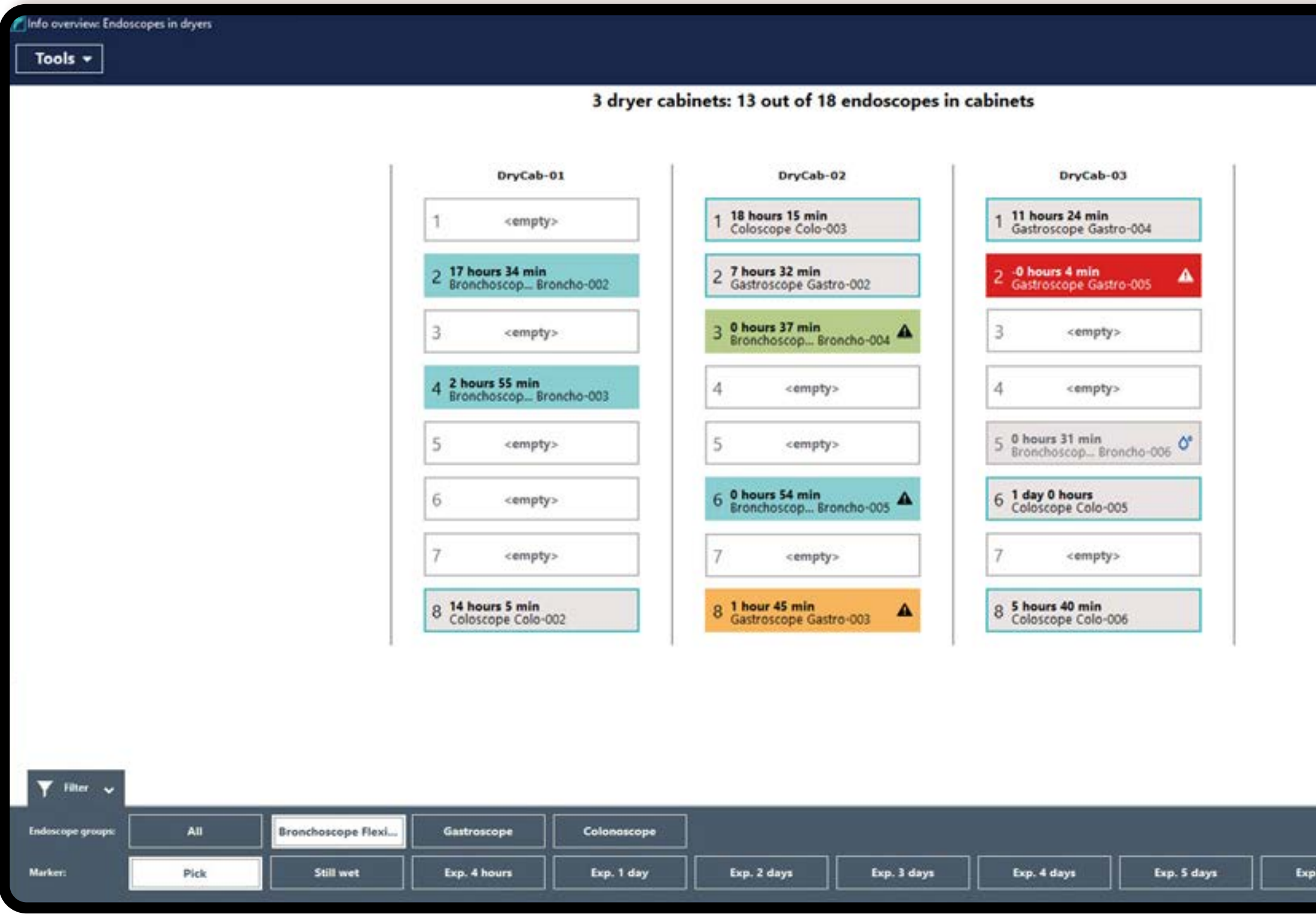

- 🔹 Filtrer par statut ou par catégorie
- Résultats filtrés
- Endoscopes à choisir
- 💧 Toujours humide. Temps restant avant possibilité de retrait
- ⚠️ Indicateur d’expiration
- Bientôt expiré
- Expiré

Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison

- Services continus

Durée de vie prolongée grâce à l’emballage sous vide

Assure un stockage et un transport sûrs de vos endoscopes flexibles

T-DOC prend en charge l’emballage sous vide des endoscopes en utilisant Getinge Vac-a-Scope et d’autres appareils de mise sous vide, garantissant leur disponibilité lorsque cela est le plus nécessaire. Ce processus protège l’intégrité de l’endoscope pendant le stockage et le transport jusqu’à son ouverture pour une utilisation sur un patient.

Un stockage et un transport sécurisés contribuent à réduire le retraitement inutile, économisant à la fois du temps et des coûts. Moins d’usure causée par des retraitements et des transports répétés prolonge la durée de vie de l’endoscope tout en réduisant également les coûts des consommables en diminuant le besoin de produits chimiques supplémentaires.

Avec T-DOC, chaque étape de l’emballage, du stockage et du transport est documentée, fournissant une traçabilité complète et renforçant la sécurité des patients.



Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison

- Services continus


Quand chaque minute compte

Prévenir l’expiration des endoscopes et améliorer la conformité aux règles de durée de validité.

Le temps est crucial dans la gestion des endoscopes, car ils présentent un risque d’infection plus élevé que les instruments chirurgicaux. T-DOC EndoTrace vous permet de configurer des règles de de durée de validité pour définir les intervalles maximums entre les étapes clés. Celles-ci peuvent être attribuées à des endoscopes individuels ou à des groupes, calculant en continu les dates d’expiration en fonction de vos règles définies pour garantir que les endoscopes restent en bon état.

Et si un endoscope dépasse le délai défini et doit être retraité ou mis en quarantaine ? Aucun problème. T-DOC EndoTrace empêchera le personnel d’expédier l’endoscope aux utilisateurs en tant que mesure de sécurité supplémentaire.

En garantissant le respect des intervalles de temps requis, ces règles de durée de validité renforcent la sécurité des patients et maximisent la disponibilité des endoscopes.

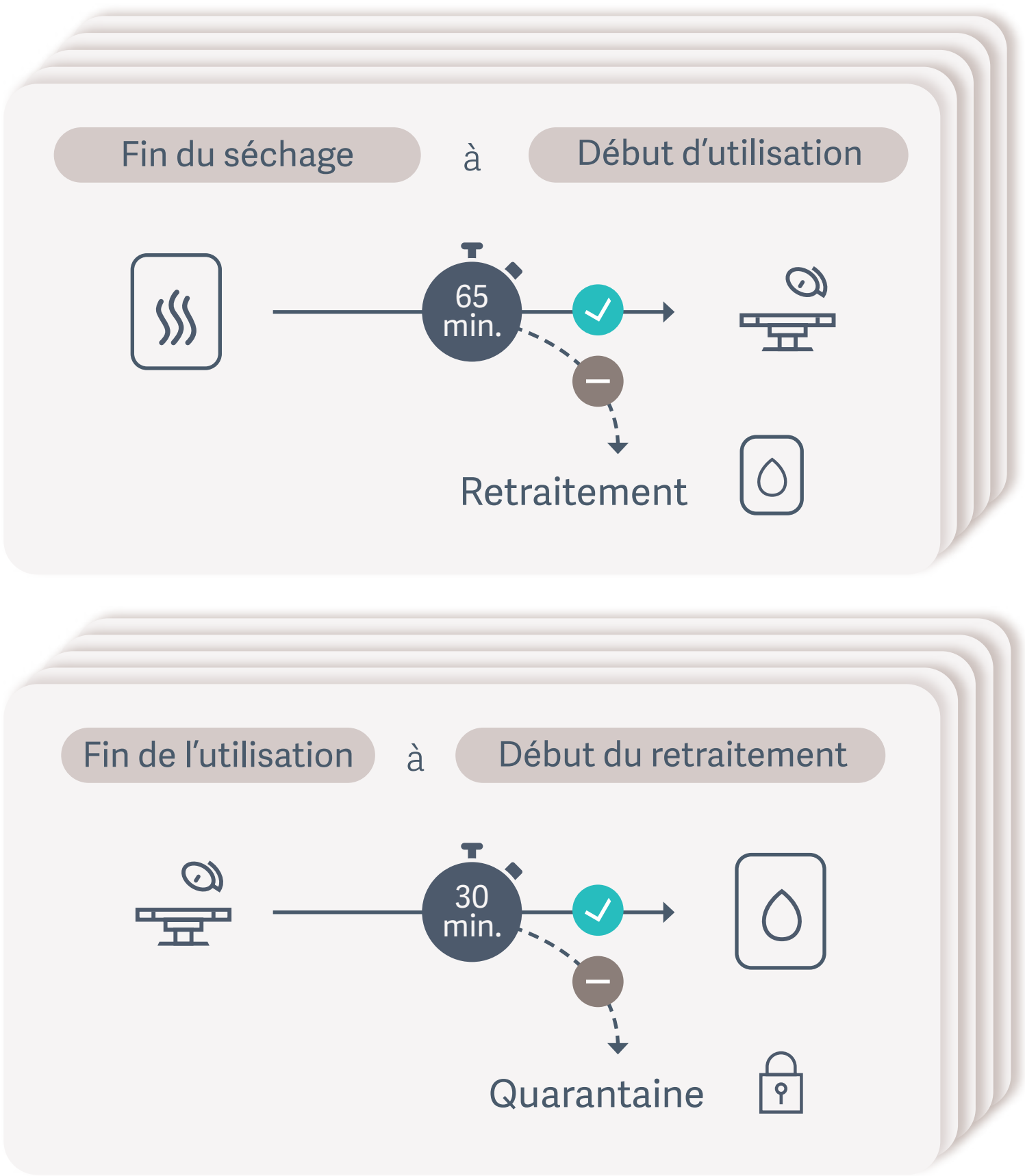

Ci-dessus 2 des plus de 10 règles de durée de validité disponibles dans T-DOC - toutes avec des intervalles de temps configurables.

Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation

Modules complémentaires

- Équipement connecté

Livraison

- Services continus

Modules complémentaires pour s'adapter à votre flux de travail

Améliorez votre solution avec une gamme de modules complémentaires conçus pour améliorer les processus, renforcer la traçabilité et booster la conformité. Ces fonctionnalités offrent des fonctionnalités avancées pour répondre aux exigences complexes du retraitement moderne des endoscopes.

Réparation



Gérez tous les aspects des réparations d'endoscopes, y compris le type de réparation, l'état, les détails du fournisseur, les coûts et les délais de service. Les réparations sont automatiquement retirées du stock actif, garantissant une précision opérationnelle.

Priorisation



Permettre la priorisation des endoscopes grâce à des codes de traitement accélérés, veillant à ce que les unités urgentes reçoivent un traitement prioritaire. L'efficacité du flux de travail est améliorée en s'assurant du retraitement rapide des instruments critiques.

Incubation



Suivez les indicateurs biologiques et chimiques utilisés pendant la stérilisation, et effectuez l'enregistrement par lots et la journalisation des données des incubateurs. Vous garantisiez ainsi la conformité aux normes de sécurité strictes et renforcez la sécurité des patients.

Documents externes



Accédez, gérez et visualisez des documents externes pertinents (manuels des fabricants, directives, etc.) directement dans T-DOC. Le contrôle centralisé garantit que seules les personnes autorisées peuvent ajouter, modifier ou supprimer ces documents.

Web



L'accès à T-DOC via un navigateur offre la possibilité de recherches intelligentes, la création de commandes, y compris des mises à jour avec une interface de panier d'achat intuitive. Cela permet une communication rapide et fluide entre les services.



Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace

Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison

- Services continus

Intégration fluide avec vos équipements

Assurez la conformité et améliorez les performances grâce à une documentation précise des données essentielles de retraitement.



Connectez vos stérilisateurs Getinge, AER et armoires de séchage pour garantir une traçabilité complète et améliorer l'assurance qualité. Des contrôles automatiques vérifient l'enregistrement correct, réduisant les erreurs et garantissant un traitement approprié.

En plus des équipements Getinge, T-DOC est compatible avec la plupart des autres marques et modèles d'équipements.

En savoir plus

Assurez une documentation précise des processus des équipements :

- Temps et phase du cycle
- Température
- Pression et circulation de l'air
- Étiquette RFID de l'endoscope
- Étiquette RFID de l'utilisateur
- Identifiant de l'équipement / emplacement
- Charge
- Type de programme
- Exposition au détergent/ désinfectant

Livraison fluide pour des résultats durables

Introduction

- Présentation
- T-DOC EndoTrace


Caractéristiques et Avantages

- Traçabilité
- Aide utilisateur
- Retraitement flexible
- Séchage et stockage
- Emballage sous vide
- Normes de conservation
- Modules complémentaires
- Équipement connecté

Livraison

- Services continus

Nous offrons une expérience de service complète, combinant une planification experte, une exécution impeccable, un soutien continu et une formation professionnelle. Notre cadre à quatre piliers garantit une voie claire vers le succès, avec pour base la transparence, l’adaptabilité, et le partenariat à long terme.

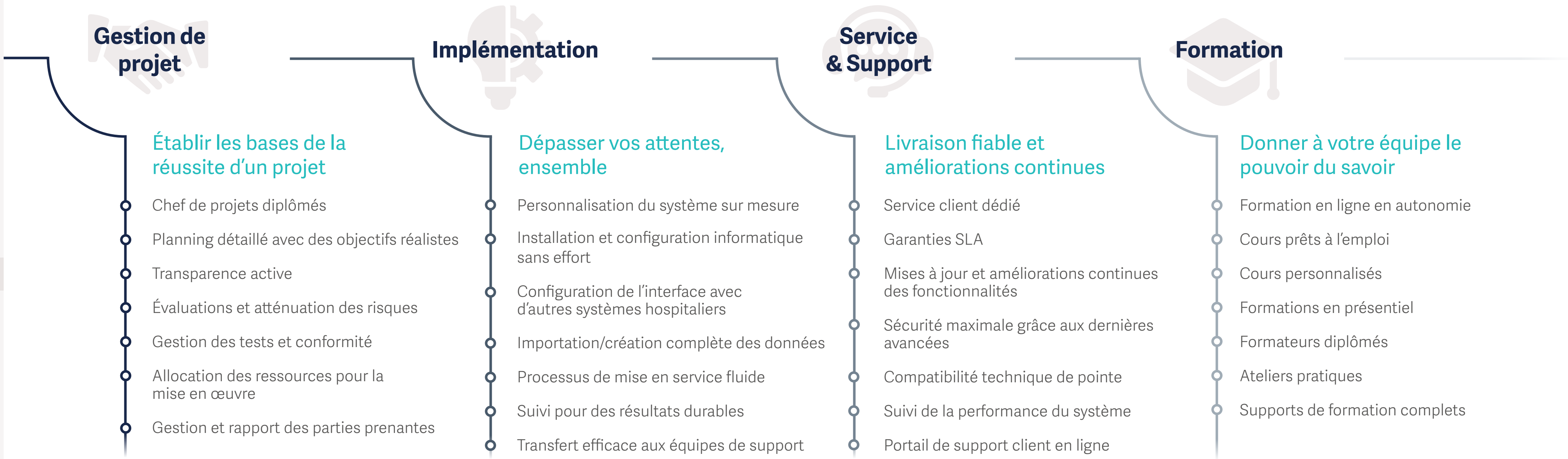

Possibilités d'évolution future

T-DOC EndoTrace peut être mis à niveau vers T-DOC 2000, la solution haut de gamme de Getinge pour la gestion des dispositifs stériles. Cette solution assure une traçabilité complète de tous les actifs chirurgicaux et une utilisation optimisée du bloc opératoire et des ressources.

T-DOC 2000 offre des intégrations à la pointe de la technologie avec les systèmes informatiques hospitaliers et l'automatisation, connecte les hôpitaux en configuration multi-sites et soutient la prise de décision grâce à des fonctionnalités avancées de Business Intelligence (BI).

En savoir plus sur T-DOC

Mentions légales

Système Vac-a-Scope - Système d'emballage sous vide destiné aux endoscopes flexibles et semi-rigides secs et désinfectés à haut niveau. Il s'agit d'un dispositif médical de classe I. Produit fabriqué par MAQUET GmbH, Allemagne. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.

Ces informations sont destinées à un public professionnel. Elles sont fournies à titre d'information uniquement et ne doivent pas remplacer le mode d'emploi ou le manuel d'entretien. Getinge n'est pas responsable des actions ou omissions d'une partie sur la base de ces informations, et l'utilisateur s'y fie à ses risques et périls. Les solutions et produits mentionnés peuvent ne pas être disponibles ou autorisés dans votre pays. Les informations ne peuvent être copiées ou utilisées, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de Getinge.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com
PUB-2025-0194-B, version de juin 2026

Fabricant: Getinge IT Solutions ApS

© 2025 Getinge · Getinge et **GETINGE**  sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

GETINGE 