

A close-up, low-angle shot of a Maquet Corin Mobile Operating Table. The table's frame is dark grey metal. A circular light fixture with a ring of blue LEDs is visible on the left. A control panel with a screen and buttons is in the lower right. The background is dark and out of focus, showing another light fixture.

Lernen Sie Ihren neuen
Teamkollegen kennen

Maquet Corin Mobiler OP-Tisch

Intuitiv, sicher, intelligent und vernetzt

GETINGE ✱

GETINGE ✱



Maquet Corin Mobiler OP-Tisch

Die OP-Intelligenz von morgen ist schon heute verfügbar

Maquet Corin ist ein mobiler OP-Tisch mit intelligenter Führung, der dazu beitragen kann, die Prozesse in Ihren OPs zu optimieren. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Patientinnen und Patienten konzentrieren und sich auf Ihren OP-Tisch verlassen. Er gibt Ihnen intuitive visuelle Rückmeldungen, die Ihnen den Umgang mit Risiken erleichtern. Einfache Einrichtung und Positionierung von Patient/-innen für einen idealen Zugang zum Operationsfeld und optimale Ergonomie. Kurz gesagt, Maquet Corin ist Ihr neuer Teamkollege, der Ihnen Folgendes bietet:

- + Erleichterung von Teamarbeit und Kommunikation
- + Sicherheit für den Schutz von Personen und Ausstattung
- + Zeitersparnis
- + Hohe Flexibilität
- + Digitale Vernetzung

→ Mehr erfahren

Das neue Herzstück Ihres OPs

Entdecken Sie Maquet Corin

Sofortiger Stopp

bei Erkennen möglicher Kollisionen unter dem Tisch.

Schutz vor

Überlastung des Tisches ist gegeben durch integrierte Sensoren.

IPC- oder SFC-Polster

optimieren den Patientenkomfort bei gleichzeitiger Reduzierung kostspieliger Komplikationen.

→ Mehr erfahren

Unterstützung für die Adipositaschirurgie

dank einer Gesamtbelastbarkeit von bis zu 545 kg.

Sichere Positionierung

dank Kippsicherung.

Fortschrittliche Wireless-Konnektivität

mit einem internen Computer.

Optimierte Patientenpositionierung

durch simultane multidirektionale Verstellbereiche.

Beschleunigung des Patiententransports

mit motorisierten Optionen und Tischanpassung, während der OP-Tisch entriegelt ist.


Intuitive farbcodierte Benutzerführung

zum Abgleich der Fernbedienung mit den Feedback Lights an den motorischen Gelenken.





Die Farben sprechen für sich Klare Nachrichten halten alle auf dem Laufenden


Maquet Corin fördert die Teamarbeit und Kommunikation während eines chirurgischen Eingriffs. Die Feedback Lights an allen vier motorischen Gelenken der Lagerfläche liefern eine direkte visuelle Rückmeldung für das gesamte OP-Team, auch wenn der OP-Tisch abgedeckt ist.

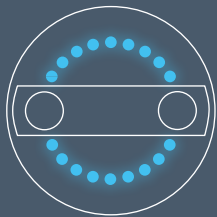


i Informationen zur Ausrichtung des Patienten/der Patientin/Angabe der Gelenkposition (falls abgedeckt)

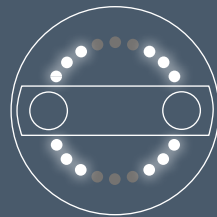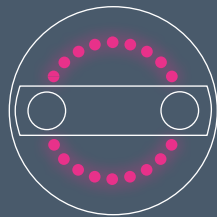


↔ Bewegungsvorgang läuft

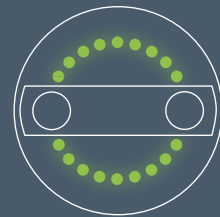

✓ Zielposition erreicht

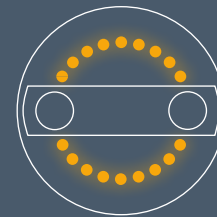

→ Bewegungsbegrenzung erreicht

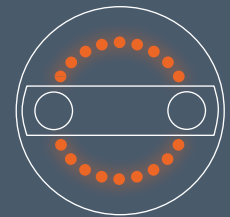

⚠ Warnung



Eindeutige und einheitliche Farbcodes auf der Fernbedienung und den Feedback-Leuchten an den motorischen Gelenken.



Maquet Corin schützt Menschen und Geräte Fokus auf Ihre Patient/-innen

Verhindern Sie Bedienfehler durch intuitive Bedienelemente wie Feedback Lights und akustische Signale.

- Das Kollisionserkennungssystem schützt nicht nur das OP-Team, das um den OP-Tisch herum arbeitet, sondern auch alle Geräte, die häufig unter dem Tisch platziert werden, wie C-Bögen oder Patienten-Wärmesysteme.
- Die Überlastungserkennung schützt den OP-Tisch vor Schäden an der Konstruktion.
- Die Kippsicherung sorgt auch im entriegelten Zustand oder bei schwerst adipösen Patient/-innen für sichere Positionierung der Patient/-innen in der Adipositaschirurgie. Die Möglichkeit, den Tisch in einer entriegelten Position zu verstellen, bietet dem OP-Personal Flexibilität und Sicherheit für die Patient/-innen beim Positionieren und Transportieren des Patienten/der Patientin und steigert die Effizienz und Einfachheit der Vorgänge.
- Der Dekubitus-Timer erinnert Sie daran, wenn ein Patient oder eine Patientin während eines längeren Eingriffs umgelagert werden muss.






Profitieren Sie von Zeiteinsparungen mit Maquet Corin Support während Ihres gesamten OP-Workflows

- Konfigurieren Sie bis zu 30 personalisierte Benutzersequenzen mit bis zu 40 Wegpunkten: Zeichnen Sie Ihren individuellen Weg für eine reibungslose Positionierung des Patienten/der Patientin auf.
- Voreinstellung für gängige chirurgische Positionen wie Beach Chair, Flex, Reflex, horizontaler Rücken und Untersuchung.
- Verschiedene simultane Bewegungsmöglichkeiten für eine schnelle und präzise Verstellung in für den Eingriff relevante Positionen.
- Dank der automatisierten Erkennung und Kennzeichnung der Lagerflächenorientierung durch Feedback-Leuchten können Fehler vermieden werden. Die Sichtbarkeit ist auch durch sterile Abdeckungen hindurch gewährleistet.
- Optimierter Patiententransport: Der OP-Tisch lässt sich im entriegelten Zustand verstellen, um die Reaktionsfähigkeit während des Transports aufrechtzuerhalten, wenn Notfallpositionen erforderlich sind. Auto Drive und Sensor Drive ermöglichen einen reibungslosen Transport der Patient/-innen.

Bis zu 40 individuelle Wegpunkte für jede Benutzersequenz programmierbar.



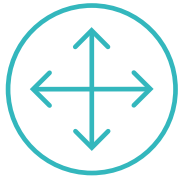

Ein breites Spektrum an Möglichkeiten Maquet Corin bietet Ihnen Flexibilität

**Maquet Corin ist ein Tisch, der alle Fachbereiche abdeckt.
Er kann sowohl für die Allgemeinchirurgie als auch für Fachbereiche
wie die Adipositaschirurgie verwendet werden.**

- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg bis 45°.
- Kantung bis 28°.
- Hohe Kombination aus Trendelenburg und Kantung: 30°/20°.
- Höhenverstellungen von 580 bis 1.120 mm für bessere Ergonomie im OP.
- Simultane Bewegungen unterstützen eine schnelle und präzise Verstellung in für den Eingriff relevante Positionen
 - Höhe und Rückenplatte/Höhe und Beinplatte.
 - Längsverschiebung und Höhe.
 - Trendelenburg- und Rückenplatte.
- Einheitliche Schnittstelle, kompatibel mit bestehenden Maquet OP-Tisch-Zubehörteilen für Maquet Meera, Otesus und Yuno II.
- Zugang zu hybriden und navigierten Prozeduren: Dank der speziellen Schnittstelle eignet sich Maquet Corin auch für hybride und navigierte Operationen, da er die Befestigung einer Kohlefaserplatte gestattet, um einen langen 3D-durchleuchtbaren Bereich und einen guten Zugang für mobile Bildgebungsgeräte wie 3D-C-Bögen und CTs zu bieten.





Ein breites Spektrum an Möglichkeiten Maquet Corin bietet Ihnen Flexibilität


Ermöglicht bariatrische Operationen.

Verwandeln Sie Ihren Maquet Corin-OP-Tisch in einen Adipositas-Tisch dank

- einer Gesamtbelastbarkeit bis zu 545 kg
- eines speziellen Adipositas-Sets für große Körper, bestehend aus einer vergrößerten Auflagenfläche
- kombiniert mit extra dicken und extra großen Polstern (760 mm Breite).

Zusätzlich können Armlagerungen und Beinhalter angebracht werden.



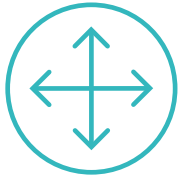

Ein breites Spektrum an Möglichkeiten Maquet Corin bietet Ihnen Flexibilität

Lässt sich mit dem Extensionsadapter leicht in einen speziellen OP-Tisch umwandeln.

Die richtige Patientenlagerung macht bei einem orthopädischen Eingriff den Unterschied. Sie ermöglicht weniger invasive Techniken, die das Operationsergebnis verbessern und die Genesung des Patienten/der Patientin beschleunigen können.

Geringe hat einen neuen Standard gesetzt, um spezielle orthopädische und traumatologische Anwendungen zu unterstützen, die Hyperextension, Abduktion, Adduktion und Rotation der Beine ermöglichen.

Anwendungsbereiche

- Direkt anteriorer Zugang bei der Hüft-TEP.
- Dynamische Hüftverschraubung.
- Hüft-Arthroskopie.
- Beckenfraktur.
- Femurmarknagelung.
- Femurplattenosteosynthese.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Patient/-innen und reduzieren Sie gleichzeitig Ihre Arbeitsbelastung. Erleichtern Sie Ihre orthopädischen und traumatologischen Verfahren.

→ Mehr erfahren





Digitale Vernetzung Mit FleetView

Im Operationssaal
mit einfachem und schnellem Zugriff auf eine Übersicht
über Online-Ressourcen.


- Gebrauchsanweisung, HTML und PDF.
- Dokumente und Links.
- OP-Tisch, Details und Status.

Über den vernetzten OP-Tisch können Biomediziner und Servicetechniker problemlos auf eine Vielzahl von Servicedaten und Nutzungsstatistiken zugreifen. Sicherstellen, dass der Tisch immer einsatzbereit ist, wenn er für eine Operation benötigt wird.

Online
über das FleetView-Webportal.

- Maximieren Sie die Geräteverfügbarkeit in Ihrem OP.
- Erleichtert Service und Wartung.
- Schneller Remote-Support von Getinge.
- Verfügbare und einsatzbereite Geräte.
- Statusübersicht der installierten Geräte.
- Echtzeit-Benachrichtigungen.
- Erkenntnisse aus Nutzungsstatistiken.

→ Mehr erfahren

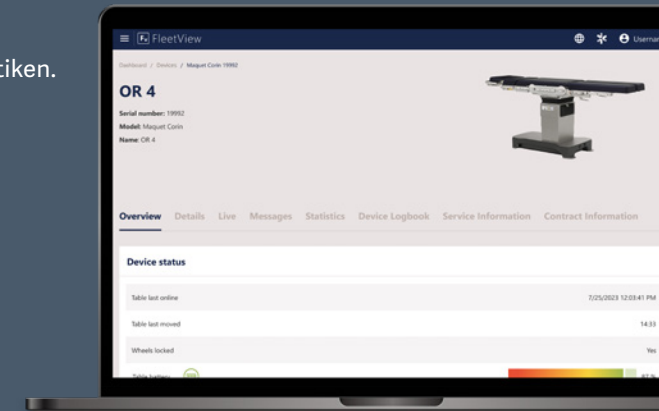

Technische Daten

Erfahren Sie mehr über Maquet Corin

Abmessungen

Länge der Basis-Lagerfläche	892,5 mm $\pm$ 5 mm
Breite der Basis-Lagerfläche	548 mm $\pm$ 5 mm
Breite der Basis-Lagerfläche mit Gleitschienen	590 mm $\pm$ 10 mm
Höhe (ohne Polster)	580–1.120 mm $\pm$ 10 mm


Gesamtbelastung

Maximale Gesamtbelastung	545 kg
Maximale Gesamtbelastung beim Transport	300 kg

Verstellbereiche

Längsverschiebung	460 mm $\pm$ 5 mm
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	45° $\pm$ 3°
Kombinierte Trendelenburg/Kantung	30°/20°
Kantung nach links/nach rechts	28° $\pm$ 3°
Rückenplatte (normale Schnittstelle), auf	90° $\pm$ 2°
Rückenplatte (normale Schnittstelle), ab	90° $\pm$ 2°
Beinplatte auf	90° $\pm$ 2°
Beinplatte ab	110° $\pm$ 2°

Die US-Version ist mit einer Körperbrücke ausgestattet.

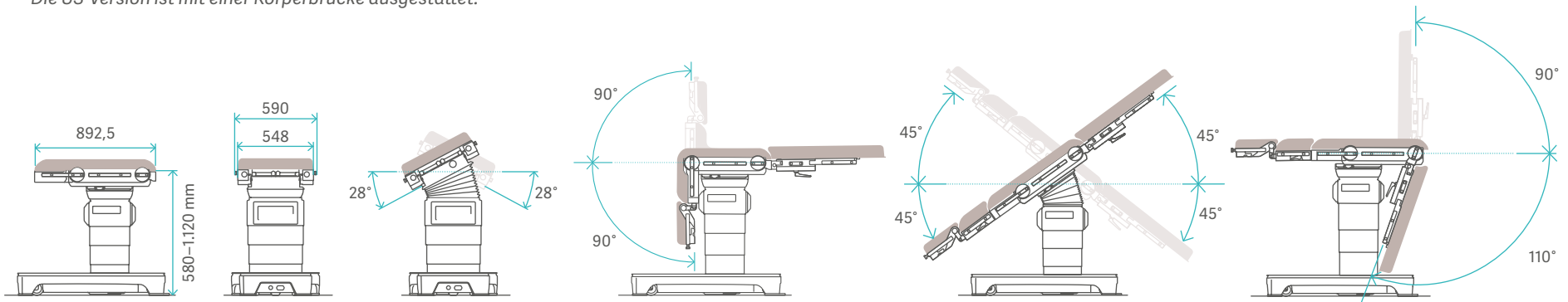


Technische Daten

Optimiert für Eingriffe mit Bildgebung

Mit CFK-Einhängeplatte

1160.45XX

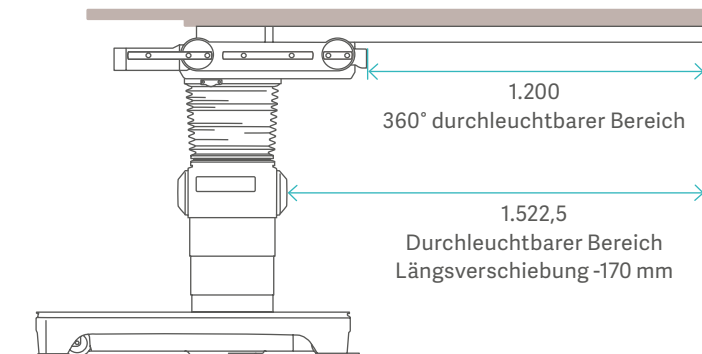

Alle Maßangaben in mm.





Technische Daten

Optimiert für Eingriffe mit Bildgebung

Mit Standardzubehör/Modulen in normaler Ausrichtung

(1160.32/55XX, 1160.53/64XX, 1160.50XXx)

Volle Beweglichkeit möglich.

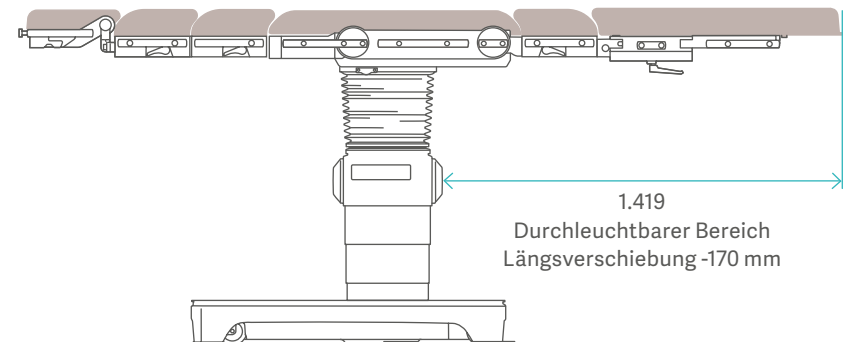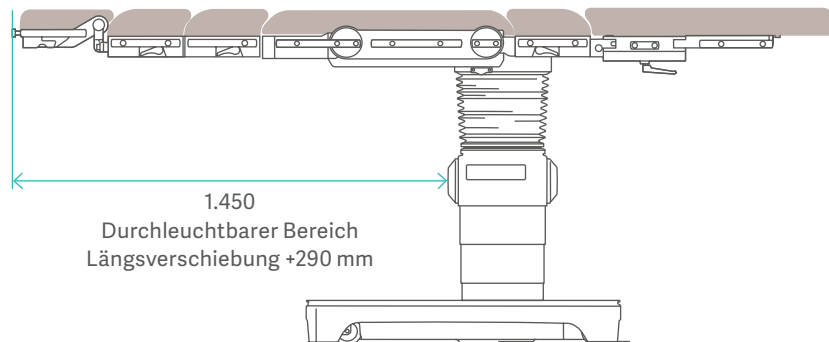

Alle Maßangaben in mm.



Technische Daten

Optimiert für Eingriffe mit Bildgebung

Mit Standardzubehör/Modulen in Reverse Ausrichtung

(1160.32/55XX, 1160.53/64XX, 1160.50XXx)

Volle Beweglichkeit möglich.

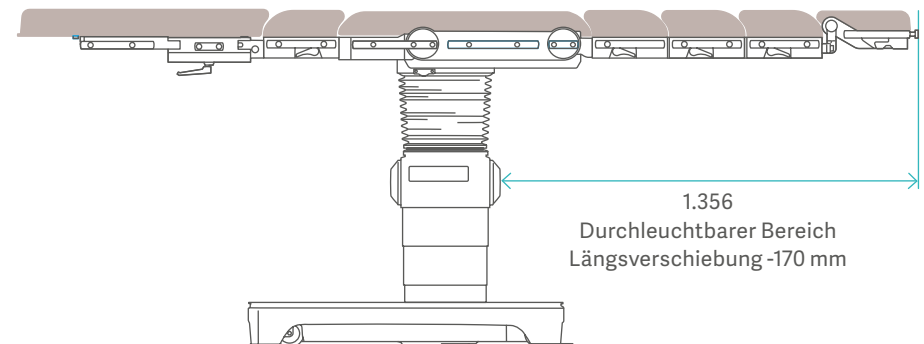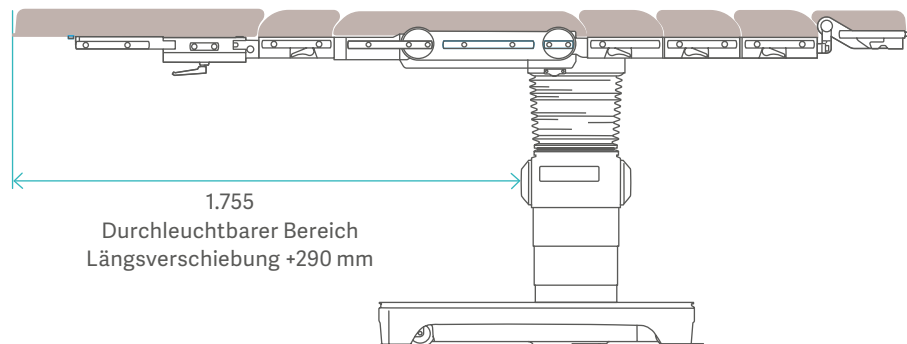

Alle Maßangaben in mm.

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzerin oder des Benutzers.

Die genannten Therapien, Lösungen oder Produkte sind möglicherweise in Ihrem Land nicht verfügbar oder zulässig. Diese Informationen dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Getinge weder ganz noch teilweise kopiert oder verwendet werden.

Hersteller • Maquet GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-0 • info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 61 836 47 70 • info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:

Getinge Experience Center Frankfurt • De-Saint-Exupéry-Straße 10 • 60549 Frankfurt am Main • Deutschland • gec.frankfurt@getinge.com

© 2025 Getinge | Getinge und **GETINGE**  sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Getinge AB, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.
DMS-0004121-v2 | Alle Rechte vorbehalten.

GETINGE 